

Therapy Times' MVP Awards:



Dynamic Stair Trainer

Uno dei più Innovativi Prodotti nel Settore della Terapia Riabilitativa !

"I fisioterapisti della clinica St. John's Rehab (USA) iniziano ad utilizzare la scala in fase molto precoce del processo riabilitativo. La possibilità di regolare in altezza i gradini rende più facile individuare il trattamento più adatto ad ogni singolo paziente ottimizzandone i tempi di recupero ed eliminando i rischi correlati alla necessità di portare il paziente su una rampa di scale convenzionali. Inoltre permette al fisioterapista di incrementare gradualmente la difficoltà aumentando l'altezza del gradino agendo sui semplici comandi manuali e sui corrimano facilmente regolabili. I pazienti sono meno timorosi, provano minor frustrazione e dolore rispetto a quanto normalmente associato all'impiego di scale non regolabili. I pazienti riferiscono una maggiore sensazione di successo, sicurezza e fiducia in se stessi, mentre i fisioterapisti hanno molto apprezzato DST e vorrebbero averne una nel proprio reparto di riabilitazione."

Elizabeth Pretorious, PT, MPT, NCS (USA)

Source: www.therapytimes.com/content=0502J84C4896B88440A040441



DST E' UNO STRUMENTO UNICO CHE CONIUGA I GRADINI REGOLABILI ALLE BARRE PARALLELE PER UN COMPLETO ALLENAMENTO DI POSTURA E DEAMBULAZIONE.

DST È UN'ATTREZZATURA INNOVATIVA AD ELEVATA EFFICACIA E BASSI COSTI PER LA RIABILITAZIONE CHE CONSENTE AI PAZIENTI DI REALIZZARE IL LORO PIENO POTENZIALE RIABILITATIVO.

SEMPRE PIÙ PAZIENTI POSSONO BENEFICIARE DELL'UTILIZZO DI DST CON I SUOI NUOVI ACCESSORI!!



VANTAGGI UNICI:

- Un unico strumento di training per le scale e per la deambulazione
- Programmazione personalizzata in base alle abilità del paziente
- Possibile piena autonomia di esercizio per i pazienti
- Aumentata motivazione del paziente
- Risparmio di tempo e fatica
- Documentabilità dei progressi del paziente



ESSENZIALE PER:


- Centri di riabilitazione
- Centri di riabilitazione pediatrica
- Reparti di terapia fisica
- Centri di riabilitazione cardiaca
- Centri di riabilitazione sportiva
- Centri di assistenza specializzata per anziani non autosufficienti
- Centri ambulatoriali



CARATTERISTICHE:

- Altezza regolabile con comando tramite una comoda pulsantiera
- Indicazione visiva dell'altezza dello scalino
- Altezza e larghezza del corrimano facilmente regolabili
- Superficie antiscivolo per una maggiore sicurezza
- Accessibile ai disabili utilizzatori di sedia a rotelle


SEMPLICE DA UTILIZZARE

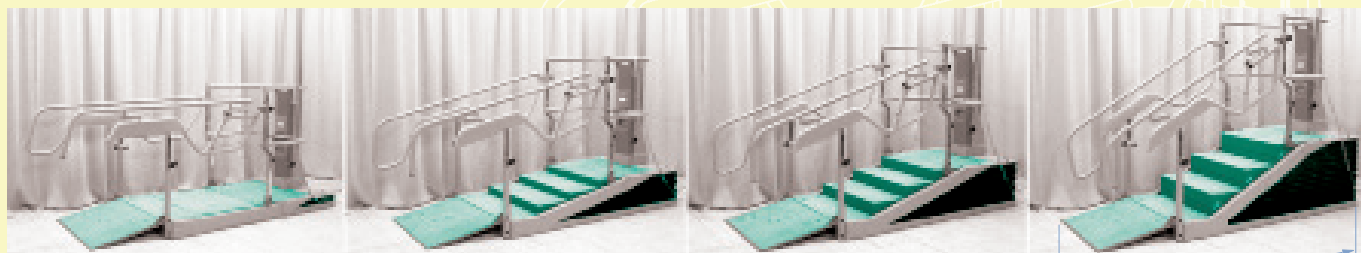

L'altezza del gradino viene personalizzata alle abilità del paziente tramite l'utilizzo di un semplice pulsante.

L'altezza degli scalini può variare da 0 a 16,5 cm.

NUOVI ACCESSORI PER DST DAL 2009

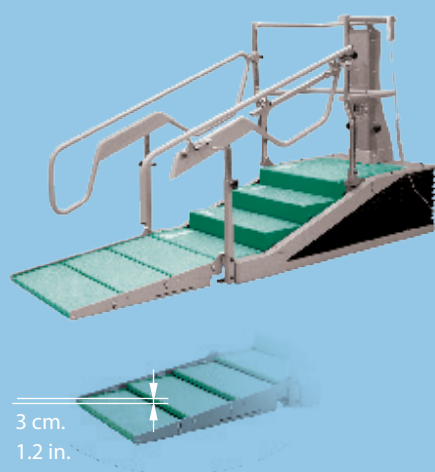


CSR-1000 (RAMPA DI ACCESSO REGOLABILE):

Una moderata pendenza aggiuntiva, utile per facilitare l'impiego in particolari pazienti. Attraverso una leva CSR può essere regolata per formare tre ulteriori piccoli gradini, arrivando così ad un totale di sette, permettendo un accesso più graduale ai gradini con altezze superiori.



WAH-1000 /L (CORRIMANO DESTRO/SINISTRO CON LARGHEZZA REGOLABILE):

Un singolo WAH-1000 consente al fisioterapista di modificare facilmente la distanza tra i corrimano fino a 12 cm. Utilizzando due WAH-1000 è possibile mantenere i pazienti al centro della scala, oppure facilitare l'uso di DST in ambito pediatrico.

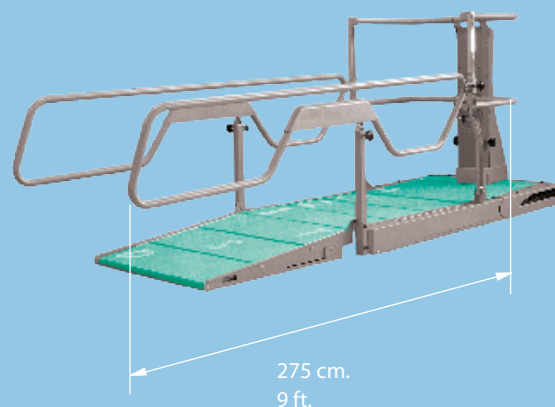

LHR-1000 (CORRIMANO LUNGO):

Corrimano extra lunghi per coloro che desiderano utilizzare DST come regolari barre parallele.

L'LHR è più lungo di 50 cm del corrimano regolare, per un totale di 275 cm di barre parallele.

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

ProLife Innovations S.r.l.
Via Statale 12, n° 165/13
41036 Medolla (Mo) Italia
Tel. +39 0535 51085
Fax. +39 0535 661703

INFO@PROLIFEINNOVATIONS.COM WWW.PROLIFEINNOVATIONS.COM
REG. MIN. DISPOSITIVI MEDICI N° 443627

PATENTED



PRODUTTORE



www.dpemed.com